

beurer MG 295 HD-3D



Masažinė kėdė Beurer MG 295

Gerbiamas pirkėjų,

Mes labai džiaugiamės, kad Jūs išsirinkote mūsų produkciją. Mūsų gaminiai pasižymi gera kokybe ir patikimumu įvairiose srityse: vaikų priežiūra, grožis, sportas, šiluma, temperatūros, kraujo spaudimo ir svorio matavimas, skausmo terapija, masažas, oro drėkinimas. Prašom atidžiai perskaityti instrukciją ir vykdyti visus jos nurodymus.

Su geriausiais linkėjimais,

Jūsų Beurer


Komplektą sudaro:

- „Shiatsu“ masažinė kėdė
- Instrukcija

⚠ Įspėjimas

- Prietaisas skirtas naudojimui namuose – asmeniniam naudojimui, naudoti komerciniams tikslams draudžiama.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai vyresni nei 8 metai, taip pat asmenys su negalia, sensorinėmis ar protinėmis ligomis, jei juos prižiūri suaugusieji, ir susipažino su instrukcija kaip naudotis ir galimais pavojais.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Valymas ir techninis aptarnavimas vaikams leidžiamas tik prižiūrint suaugusiems.
- Elektros laidas nėra taisomas. Jį pažeidus, reikia utilizuoti visą prietaisą.


Instrukcijoje naudojami simboliai:

 **Ispėjimas** Perspėjimas apie traumos pavojų arba pavojų sveikatai

 **Dėmesio** Galimas prietaisų ar priedų gedimas, netinkamai jį naudojant

 **Svarbi informacija**

 Prietaisas turi dvigubą apsauginę izoliaciją (2 apsaugos klasė)

 Naudokite tik patalpoje

1. Apie „Shiatsu“ masažą

„Shiatsu“ masažas prieš 100 metų atsirado Japonijoje, sukurtas kinų tradicinės medicinos pagrindu. „Shiatsu“ masažo tikslas yra žmogaus fizinės, emocinės ir dvasinės savijautos visumos intensyvinimas. Tam reikia pašalinti energetinius blokus ir energetines prastovas bei stimuliuoti organizmo savireguliacijos mechanizmą. Pažodžiui „Shiatsu“ verčiamas kaip „pirštų spaudimas“. Be pirštų, masažo metu, naudojamosi kumščiais, alkūnėmis ir keliais bei masažuotojo kūno svoriu.

2. Pažintis su prietaisu

Masažuoklyje yra besisukančios masažinės galvutės, kurios imituoja „Shiatsu“ masažą atlikdamos spaudžiamus bei atpalaiduojančius judesius. Šis prietaisas judėdamas vertikaliai ir sukamųjų masažinių galvutėlių judesių pagalba energingai, intensyviai ir giliai išmasažuoja Jūsų nugarą. Šis masažuoklis skirtas tik asmeniniam naudojimui. Jis neskirtas naudoti medicinoje bei komercinėje veikloje.

3. Taisyklingas naudojimas

Šis įrenginys gali būti naudojamas tik masažuojant žmogaus nugarą. Jis negali pakeisti medicininio gydymo. Nenaudokite šio įrenginio jeigu bent vienas iš žemiau esančių punktų tinka Jums. Pasitarkite su gydytoju, jeigu abejojate ar galite naudoti šį įrenginį.

 **Ispėjimas**

Nesinaudokite masažuokliu: esant patologiniams pakitimams arba po traumų nugaros srityje (pvz.: stuburo disko išvarža, atviros žaizdos ir kt.). Taip pat prietaisas nėra tinkamas naudoti:

- Vaikams
- Nėštumo metu
- Miegant
- Automobilyje
- Gyvūnams
- Dirbant tokius darbus, kur reakcija gali būti nenusakoma

- Panaudojus medikamentus arba kt., kas apriboja pojūčius (skausmą malšinantys medikamentai, alkoholis)
- Ne ilgiau 15 minučių (galite perkaisti) ir prieš sekantį masažą, 15 minučių padarykite pertrauką

Prietaisas neskirtas žmonėms (įskaitant vaikus) turintiems fizinių negalavimų, nejautriems skausmui, sergantiems psichinėmis ligomis, neturintiems tam patirties ar žinių. Naudoti procedūras išvardinti asmenys gali tik prižiūrint asmeniui, atsakingam už jų saugumą ar gavus šio asmens instrukcijas kaip naudotis prietaisu.

Jeigu Jūs abejojate ar šis masažuoklis Jums tinka, pasitarkite su savo gydytoju.

Masažuoklis turi šildymo funkciją, kuri yra masažinėse galvutėse. Tie asmenys, kurie nejaučia aukštos temperatūros, naudodamiesi šia funkcija turi būti itin atsargūs.

Prieš naudodamiesi masažuokliu, pasitarkite su savo gydytoju:

- jeigu sunkiai sergate arba Jūsų viršutinė kūno dalis buvo operuota
- jeigu turite kardiostimuliatorių, elektroninius implantus arba kt medicininius implantus
- esant trombozei
- sergant cukriniu diabetu
- esant nepaaiškinamos kilmės skausmams

Masažuoklis skirtas tik tiems tikslams, kuriuos nurodo ši instrukcija. Gamintojas neatsako už žalą, kuri atsirado naudojant prietaisą ne pagal paskirtį.

4.Saugaus naudojimo taisyklės

Įdėmiai perskaitykite šią instrukciją. Jeigu nesilaikysite šios instrukcijos nurodymų, tai gali privesti prie traumų arba nuostolių. Įdėmiai perskaite šią instrukciją, pateikite informaciją kitiems vartotojams. Perduodant naudotis prietaisą kitiems asmenims, kartu perduokite ir šią instrukciją.

Įspėjimas

Neleiskite vaikams žaisti su įpakavimo medžiagomis (uždusimo pavojus).

Elektros šoko įspėjimas

Kad išvengtumėte traumų nuo elektros srovės su masažuokliu reikia elgtis laikantis instrukcijos nurodymų.

Dėl šios priežasties:

- Naudokite tik tą maitinimo bloką, kuris įeina į komplekto sudėtį.
- Jokiu būdu nesinaudokite prietaisu, jeigu jis turi matomus pažeidimus.
- Jokiu būdu nesinaudokite prietaisu žaibuojant ar griaudžiant.

Esant gedimui arba prietaisui dirbant su pertrūkais, skubiai jį išjunkite ir atjunkite nuo elektros lizdo. Norėdami ištraukti maitinimo bloką iš elektros lizdo, netraukite jo už elektros laido. Nelaikykite prietaiso už laido ir nenešiodami jo įjungto. Stebėkite, kad elektros laidas nebūtų arti kito karšto paviršiaus. Nelankstykite ir nesukinėkite laido. Nebandykite laido adatomis arba kitais aštriais daiktais.

Įsitinkite, kad masažuoklis, jungiklis, maitinimo blokas ir laidas nesiliečia su vandeniu, garais arba kt. skysčiais. Todėl rekomenduojama naudoti prietaisą tik sausose patalpose (niekada nesinaudokite prietaisu vonioje arbairtyje).

Jeigu prietaisas įkrito į vandenį, netraukite jo. Pirmiausia ištraukite laidą iš elektros lizdo. Saugokite masažuoklį nuo smūgių ir kritimų.

Prietaiso taisymas

Įspėjimas

- Taisyti prietaisą leidžiama tik garantinio aptarnavimo servisuose. Dėl neteisingai atlikto remonto gali būti pavojinga juo naudotis. Esant gedimui, kreipkitės į garantinio aptarnavimo centrą.
- Draudžiama atsegti masažuoklio užtrauktuką. Jis naudojamas tik technologiniais tikslais.
- Jeigu sugenda maitinimo blokas arba laidas, reikia jį pakeisti. Tačiau nemėginkite laido keisti patys - kreipkitės į garantinio aptarnavimo servisą.

Įspėjimas: gaisro pavojus

Jeigu naudojate masažuoklį nesilaikant šios instrukcijos nurodymų, gali kilti gaisro pavojus.

Todėl nesinaudokite masažuokliu:

- Jei jis yra uždengtas pledu, pagalve ar kt. medžiagomis.
- Arti degių medžiagų pvz.: benzino, dujų ir kt.

Prietaiso priežiūra

Dėmesio

Po kiekvieno masažo ir prieš kiekvieną valymą išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo bloką iš elektros lizdo.

- Nekiškite į masažuoklio laisvas angas ir besisukančias detales jokių daiktų. Stebėkite, kad besisukančios dalys galėtų laisvai judėti.
- Naudoti masažuoklį tik vertikaloje padėtyje, netieskite jo ant grindų.
- Negalima visu svoriu gulėti, stovėti ant masažuoklio judamų detalių ir/ar ant jų statyti kokių nors daiktų.
- Saugokite prietaisą nuo aukštos temperatūros.

Utilizavimas


Dėmesio

Šį prietaisą privaloma utilizuoti, pagal direktyvą dėl elektroninių gaminių ir prietaisų u 2002/96/EC-WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment). Kilus klausimams kreipkitės į vietos institucijas, atsakingas už atliekų tvarkymą.




5. Prietaiso aprašymas

„Shiatsu“ masažinė kėdė (priekis)

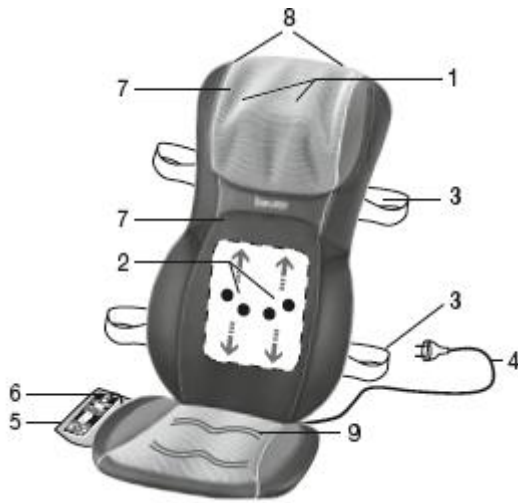

1. 2 kaklo Shiatsu masažinės galvutės
2. 4 Shiatsu masažinės galvutės
3. Tvirtinimo diržai
4. Maitinimo blokelis su šakute ir elektros laidu
5. Valdymo pultas
6. Laikymo dėklas
7. Nuimami –plaunami apsauginiai apvalkalai
8. Laikiklis - pakaba
9. Sėdynės šildymas

Valdymo pultas

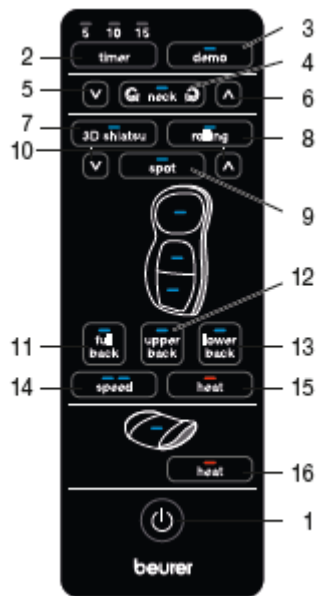

1. Įjungimo/išjungimo mygtukas
2. Laikmatis (5-10-15 minučių)
3. Mygtukas demo
4. NECK kaklo masažas (pagal/prieš laikrodžio rodyklę)
5. Mygtukas V aukščio reguliavimas (kaklo masažas)
6. Mygtukas Λ aukščio reguliavimas (kaklo masažas)
7. Mygtukas 3D shiatsu (shiatsu masažas 3D)
8. ROLLING - išilginis masažas
9. SPOT – taškinis masažas
10. Aukščio reguliavimas (taškinis masažas)
11. FULL BACK - visos nugaros masažas
12. UPPER BACK - viršutinės nugaros dalies masažas
13. LOWER BACK - apatinės nugaros dalies masažas
14. SPEED – masažo intensyvumas
15. Mygtukas heat (šildymas)
16. Sėdynės šildymas

6. Prietaiso paruošimas naudojimui

Dėmesio

- **SVARBU:** naudojant prietaisą pirmą kartą, išsukite varžtą iš galinės atlošo sienelės, naudodami pridėtą įrankį. Jeigu neišsuksite šio varžto ir pradėsite naudoti prietaisą, tokiu būdu galite jį sugadinti. Todėl šiam gedimui garantija nesuteikiama.
- Kiekvieną kartą transportuojant prietaisą, varžtą reikia įsukti. Jeigu to nepadarysite, transportuojant galite sugadinti prietaisą.
- Pritvirtinkite masažinę kėdę prie pagrindo, kuris turi sėdimą vietą ir atramą (kėdė, sofa ir pan.) Įsitikinkite, kad atlošo aukštis yra pakankamas.
- Su tvirtinimo diržais saugiai pritvirtinkite kėdę.
- Prietaisą įjunkite į elektros lizdą

7. Veikimas

Atsargiai atremkite nugarą į atlošą. Atsisėskite patogiai ir palaipsniui paskirstykite svorį ant masažinės kėdės. Masažas turi būti malonus ir atpalaiduojantis. Jei jaučiate skausmą ar nemalonumą, nutraukite masažą arba pakeiskite poziciją; pakeiskite nugaros atlošo poziciją, sėdynės aukštį, masažo intensyvumą.

- Nespauskite savo kūno dalių, ypač nespauskite pirštų tarp besisukančių masažinių galvučių.
- Atsisėskite patogiai ant kėdės ir priglauskite nugarą prie masažuoklio, stenkitės, kad sėdėtumėte per centrą ir kad masažinės galvutės būtų tolygiai nutolę nuo Jūsų stuburo tiek į kairę, tiek į dešinę.
- Įjunkite masažuoklį paspaudę įjungimo/išjungimo mygtuką.

Šviesos diodas rodo, kokia programa yra pasirinkta.

Galite pasirinkti šias programas:

1. Kaklo masažas

Norėdami įjungti kaklo masažą, paspauskite "NECK" mygtuką. Dar kartą paspaudus mygtuką, pasikeis masažo kryptis. Norėdami išjungti programą, dar kartą paspauskite mygtuką.

2. Shiatsu“ masažas

Paspauskite 3D SHIATSU mygtuką. Pasirinkite reikiamos nugaros dalies masažą: FULL BACK, UPPER BACK ir LOWER BACK.

Taškinis masažas t.y. masažas be vertikalios judėjimo. Jūs galite pasirinkti paspaudę vieną iš dviejų mygtukų SPOT. Taip Jūs galėsite pakeisti taškinio masažo padėtį paspaudę rodyklės Λ V, laikydami paspaudę rodyklės mygtuką tol, kol pasieksite norimą padėtį.

Masažo intensyvumas

Šis masažas turi du skirtingus intensyvumo greičius, kuriuos galima pasirinkti mygtuko SPEED pagalba. Jeigu yra įjungtas besisukantis masažas, pirmiausia paspauskite mygtuką 3D SHIATSU tam, kad pereiti į „Shiatsu“ masažą ir po to nustatykite norimą intensyvumo lygį.

3. Ištinis masažas

Paspauskite mygtuką ROLLING. Po to mygtukais FULL BACK, UPPER BACK ir LOWER BACK pasirinkite norimą nugaros masažo sritį.

Kai pakeičiate masažo tipą („Shiatsu“ arba išilginį masažą) prieš tai pasirinkta masažo sritis (visa nugarą, viršutinė dalis arba apatinė nugaros dalis) išsaugojama. Atkreipkite dėmesį į tai, kad pereinant nuo taškinio masažo į išilginį, Jūs iš naujo turite pasirinkti masažuojamą sritį.

4. Šildymo funkcija

Jūs galite įjungti masažinių galvučių šildomąją funkciją, paspaudę mygtuką HEAT(15). Masažinių galvučių šviesa yra mėlyna, o įjungus šią funkciją ji tampa raudona.

Prietaisas turi papildoma sėdynės šildymo funkciją. Šildymas įjungiamas paspaudus mygtuką HEAT (16).

Įspėjimas Prietaisas išsijungia automatiškai po 15 min veikimo.

8. Priežiūra ir laikymas

Valymas

Įspėjimas

- Prieš valant prietaisą, būtinai išjunkite maitinimo bloką iš elektros lizdo ir patį masažuoklį.
- Valyti galima tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Stebėkite, kad į prietaisą nepapultų skysčiai.
- Dėmes galima valyti servetėle arba drėgna kempine, esant būtinybei galima naudoti skystą muilą. Kategoriškai draudžiama naudoti valymo priemonės, turinčias savo sudėtyje skiediklio.
- Uždedamą užvalkalą galima skalbti skalbimo mašinoje 40 laipsnių temperatūroje. Apie valymą ir priežiūrą žiūrėkite etiketėje, kuri yra prisiūta prie užvalkalo. Užvalkalas prisisega lipduku po beurer užrašu. Kaklo masažo užvalkalas nusiima užtrauktuko pagalba.
- Naudokitės prietaisu tik pilnai išdžiuvus apvalkalui.

Laikymas

Jeigu Jūs ilgai nesinaudojate masažuokliu, mes rekomenduojame jį saugoti originaliame įpakavime bei laikyti sausose patalpose, ant jo nedėti jokių daiktų. Taip pat masažuoklį galima pakabinti. Įsitikinkite, kad laikiklis išlaikys masažuoklio svorį.

 **Dėmesio.**

- Jeigu Jūs įsukote transportavimo varžtą, tuomet, kai norėsite vėl naudotis masažuokliu, būtinai jį išsukite.

9. Problemų sprendimas

Problema	Priežastis	Rekomendacijos
Masažinės galvutės sukasi lėtai	Per didelis krūvis	Silpniau spauskite nugarą prie atlošo
Masažinės galvutės sukasi tik viršutinėje arba apatinėje nugaros srityje	Nustatytas masažas ribotai sričiai	Norimą nugaros sritį nustatykite mygtukais FULL BACK (VISA NUGARA)/ UPPER BACK (VIRŠUTINĖ NUGAROS SRITIS)/ LOWER BACK (APATINĖ NUGAROS SRITIS)
Masažinės galvutės nejudą	Prietaisas neprijungtas prie tinklo	Įjunkite į elektros lizdą ir įjunkite prietaisą
	Prietaisas neįjungtas	Įjunkite masažuoklį, pasirinkite masažuoti norimą sritį
	Nebuvo pašalintas transportavimo fiksatorius. Masažo mechanizmas sugadintas	Susisieki su pardavėju arba Beurer atstovu šalyje
	Įsijungė perkaitimo f-ja, prietaisas sugadintas	Kreipkitės į garantinio aptarnavimo servisą

10. Garantija

Prietaisui suteikiama 2 metų garantija.

Garantija nesuteikiama šiais atvejais:

- kai naudojamas prietaisas nesilaikant šios instrukcijos reikalavimų.
- greitai išsiekvojančioms dalims (užvalkalui).
- defektams apie kuriuos žinojo pirkėjas pirksdamas prietaisą
- esant pirkėjo kaltei.