



SILK'N FACE TITE



**VARTOJIMO
INSTRUKCIJA**

Ar nebūtų fantastiška atsukti laikrodį atgal? Norėtumėte turėti mažiau raukšlių ir stangresnę veido odą? Jūs galite atgauti savo jaunystę su fenomenaliu, odos atnaujinimo prietaisu **Silk'n FaceTite**. Paslaptis slypi revoliucinėje HT™ technologijoje, kuri stangrina veido odą, mažina raukšles ir atstato kolageno ir elastino skaidulas. Jūsų oda pakeliama, atrodo nepaprastai jaunesnė ir šviesesnė kaip niekada anksčiau! Išbandykite jauninančias grožio procedūras tiesiog namuose!

Kodėl Silk'n Face Tite?

- ❖ Revoliucinė HT™ anti-senėjimo technologija;
- ❖ Mažina raukšles, stangrina odą;
- ❖ Mažina smulkias raukšleles;
- ❖ Atnaujina kolageno ir elastino skaidulas;
- ❖ Pakelia veido kontūrus;
- ❖ Mažina dėmes nuo saulės;
- ❖ Stiprina gilesnius odos sluoksnius odos;
- ❖ Pagerina struktūrą ir odos elastingumą

Kolageno sintezė su amžiumi mažėja... Laikas sustabdyti odos senėjimą!

KODĖL VEIDO ODA SENĖJA? Mūsų oda pradeda rodyti senėjimo požymius maždaug sulaukus 25 metų; natūralus, neišvengiamas procesas. Kolagenas ir elastinas, du patys svarbiausi mūsų odos statybiniai blokai, kurie palaipsniui tampa silpnesni ir pradeda skaidytis ir lūstelių atnaujinimas labai sulėtėja. Senėjimo procesas gali būti intensyvesnis rūkant, gaunant per daug saulės spindulių ir streso. Silk'n mokslinis proveržis įtikino, kad įmanoma pastebimai atjauninti odą, **paprasciausiai savo namuose ir be operacijų.**



ODOS ATNAUJIMAS NAMUOSE.

Silk'n FaceTite yra revoliucinis prietaisas, kuris buvo specialiai sukurtas siekiant atjauninti odą. Iki šiol tai buvo įmanoma tik grožio klinikose ir grožio salonuose, kur panašios procedūros yra dažnai atliekamos labai brangiai. Tai nebėra būtina. Silk'n FaceTite tai galimybė, turėti galingą anti-senėjimo prietaisą savo namuose su HT™ technologija.

HT™ technologija: anti-senėjimo FORMULĖ

Silk'n FaceTite naudojama technologija vadinama HT™ technologija. Silk'n atnešė šią technologiją į rinką. Nuo to laiko ji tapo žinoma kaip novatoriška anti-senėjimo formulė, kurio veiksmingumas buvo išbandyta atliekant klinikinius tyrimus. Su Silk'n FaceTite, HT™ technologija jau pritaikyta veido, kaklo ir krūtinės sritims.

Kaip HT™ technologija veikia?

HT™ technologija stimuliuoja ląstelių atsinaujinimą, kuri leidžia storą odos sluoksnį vėl tapti elastingesniu. Ši technologija sujungia trijų šaltinių energijos stiprumas: "Bi-Polar RF energetikos, LED šviesos energiją ir IR Heat energiją. Tai neatsiejama trijulė, kuri nepranokstamas priešininkas kovai su senėjimo procesais odoje.

Kaip tai veikia?

3 energijos šaltiniai "Bi-Polar RF energijos, LED šviesos energijos ir IR šilumos energijos sujungti jėgas, kad pasiektų ir tiekti šilumą visiems ląstelių sluoksnių, nuo epidermio iki pačių riebalinių sluoksnių. Odos išorinė dalis įšyla iki ne daugiau kaip 43 ° C, o vidiniai sluoksniai ne daugiau kaip 50 ° C. Tai stimuliuoja skaidulų odos komplekso susitraukimą. Tai visiškai neskausminga procesas: jūs tiesiog jausite, kad oda tampa maloniai šilta. Silk'n FaceTite sprendžia problemą iš vidaus. Oda tampa pastebimai griežtesnė, atrodo jaunesnė ir jaučiasi atnaujinta.

HT™ technologija sujungia 3 energijos šaltinius:


1. "Bi-Polar RF Energija (frakcionuotas bipolinis radijo dažnio): **stiprina giliau odos sluoksnį iki 4mm.**
2. LED šviesos energijos (raudonas LED šviesa): **subalansuoja odą ir užtikrina atsigavimą.**
3. IR šilumos energijos (infraraudonųjų spindulių šiluma): **pagerina odos struktūrą.**

ODOS STRUKTŪROS ATNAUJIMAS IŠ VIDAUS


Jeigu mes padarytumėme skerspjūvį senesnės odos pamatytumėme, kad tam tikros ląstelės yra pažeistos. HT™ technologija įsiskverbia į odą, pasiekia pažeistus audinius ir atgaivina juos. Prietaiso skleidžiama šiluma stimuliuoja odos atnaujinimo savybes. Kolageno ir elastino skaidulos susijungia tarpusavyje iš vidaus. Išorėje, oda yra pastebimai gražesnė po kiekvieno gydymo; ji atrodo jaunesnė ir pastebimai griežtesnė.

Atidžiau pažvelgti į odą iš vidaus.

1 paveikslėlis: prieš pradėdant naudoti Silk'n Face Tite. Kolageno skaidulos yra sugadintos ir susilpnėjusio. Rodyklės nurodo, kur bus i raukšles.

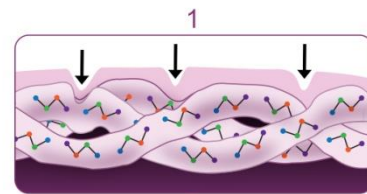

2 paveikslėlis: po Silk'n Face Tite naudojimo. Kolageno ir elastino skaidulos susijungia tarpusavyje ir odos atsinaujina iš vidaus dėka Silk'n Face Tite skleidžiamos šilumos

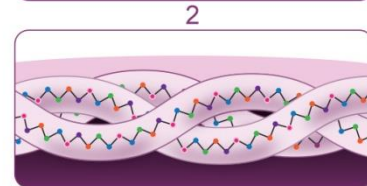

SAUGUMAS

Silk'n Face Tite buvo išsamiai išbandytas ir priima išvada, kad aparatas yra saugus naudoti namų aplinkoje tiek vyrams, tiek moterims. Gydymas yra veiksmingas ir oda iš karto jaučiasi jaunesnė. Visada prieš naudodami Face Tite atidžiai perskaitykite instrukciją.

1

Tinka visiems odos tipams ir spalvai. Silk'n Face prietaisas tinka visiems odos tipams ir visiems odos spalvoms. Todėl žmonės su tamsia odos spalva taip pat gali odą gydytis su Silk'n Face Tite. Tai yra didelis privalumas, palyginti su daugeliu kitų panašių prietaisų!

2

Tinka visam veidui ir kaklui. Su Silk'n Face Tite galite gydyti visas veido raukšles, taip pat raukšles aplink akis (bet ne akių vokų - tai pernelyg pavojinga). Gydymas taip pat puikiai tinka aplink kaklo ir krūtinės sritims.

3

Po procedūros galite užsiimti įprasta veikla. Silk'n Face Tite naudojamos 3 energijos šaltiniai (Dies RF, LED ir IR šilumos) dirba kitaip nei lazeris, o tai reiškia, kad nėra odos sveikimo laikotarpio. Odos pažeidimų tikimybė tokiu būdu žymiai sumažinama. Galite iš karto vykdyti savo kasdieninę veiklą.

4

Po procedūrų galima degintis saulėje. Kadangi Silk'n Face Tite prietaise nėra lazerio, galite iš karto degintis prieš arba po gydymo. Nebūtina naudoti SPF kremą, nors tai yra visada rekomenduojama dėl bendro senėjimo poveikio UV šviesos odos.!

TURI BŪTI NAUDOJAMI VISI 5 galios režimai

Jūsų Silk'n Face Tite turi 5 galios būsenas. Kuo didesnis energijos lygis, tuo intensyvesnis gydymas. **Pirma kartą pradėdant naudoti Silk'n Face Tite rekomenduojama nustatyti 1 lyg ir didinti lygius Jūsų patogumui.** Jūs pastebėsite, kad jūsų oda tampa šiltesnis, o tai reiškia Silk'n FaceTite daro savo darbą. Kiekvieną dieną, jūsų oda atrodys lygesnė, nepaprastai šviesesnė ir jūsų veido senėjimo požymiai bus panaikinti.

GYDYMO ZONOS

Silk'n FaceTite yra paprasta naudoti. Gydymo užtrunka tik keletą minučių. Jūs gausite geriausius rezultatus naudodamiesi gydymo planu. Paveikslėlyje matote gydymo zonas. Naudojant prietaisą, atlikite rekomenduojamą tvarką pagal numerius ir **gydyti kiekvieną zoną po 15 minučių.** Svarbu, kad jūs gydytumėte kiekvieną zoną atskirai, vieną nedidelį plotą. Tokiu būdu temperatūra ant odos išlieka pastovi. Gydymas yra daug efektyvesnis, kai atliekami tokiu būdu, nei kai jūs naudosite prietaisą per visą savo veidą. Nepamirškite įtraukti savo kaklo ir žandikaulio linija į gydymą. Iškart po pirmos procedūros pastebėsite, kad yra matomas poveikis jūsų odai: jūsų oda atrodys pastebimai griežtesnė. **Gydykite savo odą du kartus per savaitę, siekiant geriausių rezultatų.**



Silk'n SLIDER GEL

Silk'n FaceTite komplekte rasite Silk'n Slider gelį. Šis gelis labai svarbus atliekant procedūras. Svarbu, kad jūs užteptumėte ploną sluoksnį gelio ant odos, prieš pradėdami gydymą. Be gelio, prietaisas neveikia. Gelis vandens pagrindu padeda nukreipti prietaisą. Jis užtikrina, kad Silk'n Face Tite slystu lengvai per odą ir apsaugotą odą nuo perkaitimo ir paraudimo.

Gelis taip pat parduodamas atskirai mūsų internetinėje parduotuvėje **Hairfree.lt**

